

フォナック

デジタルワイヤレス補聴援助システム “ロジャー”

受信機ロジャー Xの人工内耳用設定方法

- ☑ ロジャー X
- ☑ ロジャー タッチスクリーン マイク
- ☑ ロジャー インスパイロ



ユニバーサル受信機”ロジャー X”の人工内耳用設定方法



ユニバーサルタイプ受信機 ロジャー X を人工内耳と使用する際、専用の設定が必要となります。

	メーカー / 機種名
自動モード	以下に記載の機種以外の人工内耳
情報2	メドエル社 • RONDO • OPUS スタンダード型 • DUET2
情報4	アドバンスト・バイオニクス社 • ハーモニーサウンドプロセッサ • オーリアサウンドプロセッサ (自動音量調整レベルの初期値：+8dB)
情報5	各社 • フォナック製MicroLink CI Sアダプタを使用する人工内耳 全て
情報9	コクレア社 • Nucleus 5 サウンドプロセッサ (CP810) • Nucleus 6 サウンドプロセッサ (CP910)

ユニバーサル受信機”ロジャー X”の人工内耳用設定方法

タッチスクリーンマイクで設定する

- タッチスクリーンマイクの10cm以内に人工内耳に接続したロジャー Xを近づけます。
- タッチスクリーンマイクの画面で[各種設定]、[ロジャー受信機設定]をタップします。
- ロジャー Xとの通信が終わるとメニューが表示されます。[人工内耳用設定]をタップすると設定リストが表示されます。
- 前ページの設定リストから使用する人工内耳の設定を選択します。

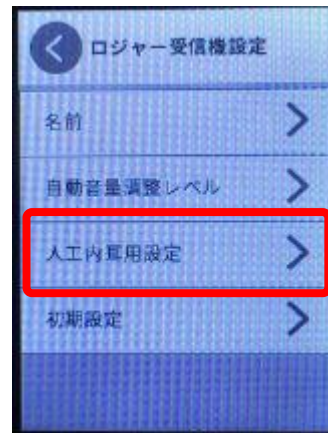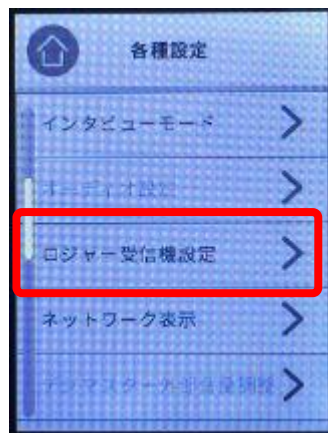

ユニバーサル受信機”ロジャー X”の人工内耳用設定方法 インスパイロで設定する

- インスパイロの10cm以内に人工内耳に接続したロジャー Xを近づけます。
- インスパイロの左ソフトキー(Check)を押します。
- Roger Xの情報がRoger inspiroに読み込まれたら右ソフトキー(管理)を押し、メニュー画面からCIモジュール、各プロセッサ専用の設定を選択します。

